

WAVETRONIC B-MAX

- **INOVAÇÃO**
- QUALIDADE
- PRECISÃO
- EXPERIÊNCIA
- **EFICIÊNCIA**



Atendimento:
(19) 3778-1400 | 3278-2744
tecnoclin@tecnoclin.com.br


Endereço:
Rua Perú, 64 - Jd. do Trevo
Campinas - SP - 13040-039



CONTROLE REMOTO PARA
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
DO ASPIRADOR DE VAPORES




WAVEVAC AUTO CONTROL

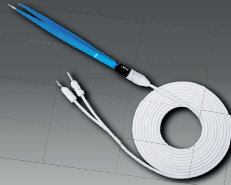


PINÇA E CABO BIPOLAR



PCM TECHNOLOGY
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE CONTATO

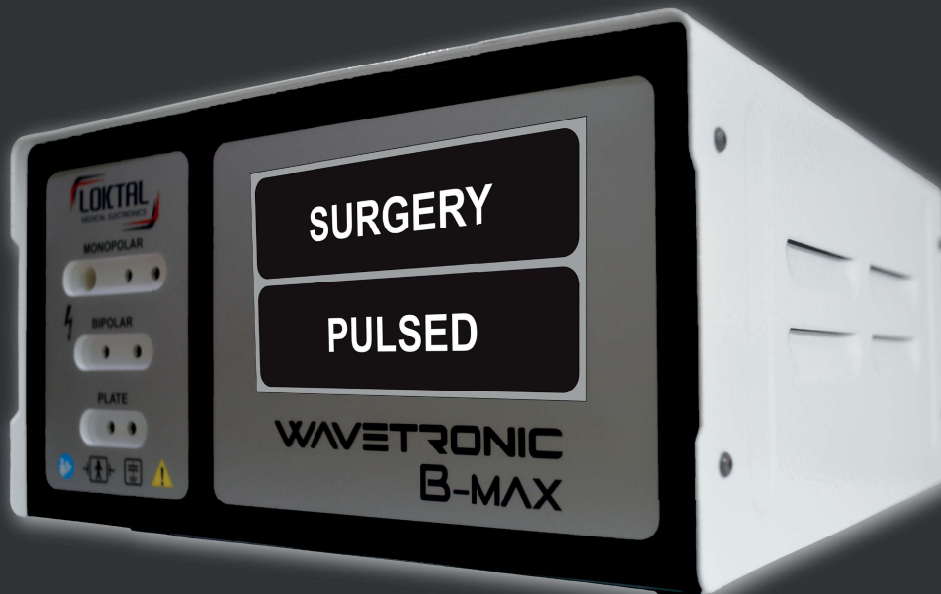

CANETA COMANDO MANUAL

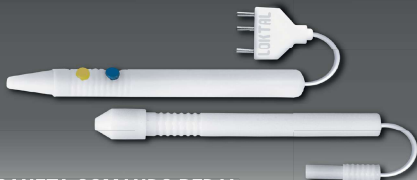

CANETA COMANDO PEDAL



PEDAL TRIPLO

MAIS DE 1000
OPÇÕES DE ELETRODOS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODO CIRÚRGICO:

- Bisturi de volatilização celular de Alta Frequência, microprocessado;
- Bipolar para micro e macro coagulações;
- Frequência de atividade eletromagnética de **4.0 MHz**
- Painel *Touch Screen* a prova de líquidos
- Potência máxima de saída: **100W**;
- Precisão de **1watt** para cada modo de operação;

8 MODOS DE OPERAÇÃO:

- **CUT PURO - 90W**
- **BLEND 1 - 80W (90% de corte e 10% de coag);**
- **BLEND 2 - 70W (70% de corte e 30% de coag);**
- **BLEND 3 - 50W (50% de corte e 50% de coag);**
- **FULGURAÇÃO - 30W (Coag spray);**
- **COAG PURO - 100W;**
- **BIPOLAR - 50W (coag);**
- **BIPOLAR MAX- 80W;**
- Memória independente para cada função;
- Pedal de Tripla ativação **CUT/COAG/COMUTAÇÃO BIPOLAR E MONOPOLAR** à prova d'água (IPX7);
- Duas opções de caneta porta-eletrodos: comando manual ou por pedal;
- Controle remoto de ativação do aspirador de vapores;
- Sinalização áudio visual de ativação com duplo tom - **CUT** (agudo) / **COAG** (grave);
- Alarme de falha ou falta da placa neutra;
- Controle do volume do sinal de ativação;
- Activation Counter: Contador de ativação, que exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado;
- **PCM Technology:** Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automático do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexão (continuidade) da Placa Neutra;
- **Três opções de Placas Neutras:** Reutilizável em aço inox, adesiva descartável simples e adesiva descartável bipartida (PCM Technology);

MODO PULSADO:

- Software de gerenciamento do "TRT" Tempo de Relaxamento Térmico;

ACESSÓRIOS PADRÃO (INCLUSOS):

- Caneta Porta Eletrodos reutilizável com acionamento por pedal e cabo de silicone de 3 metros;
- Eletrodos Cirúrgicos;
- Placa neutra reutilizável;
- Cabo de Placa neutra de 03 metros com Clipe Conector para todas as opções de placas;
- Pedal de Tripla ativação **CUT/COAG/COMUTAÇÃO BIPOLAR E MONOPOLAR** com cabo de 03 metros;

- Ampla variedade de eletrodos disponíveis
- Cabo de alimentação elétrica (ABNT);
- Manual de Instruções Digital (QR Code);

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Caneta porta eletrodos autoclavável e reutilizável com acionamento manual e cabo de silicone de 03 metros;
- Pinça Monopolar;
- Cabo de silicone autoclavável para Pinça Monopolar de 03 metros;
- Pinça Bipolar;
- Cabo de silicone autoclavável para Pinça bipolar de 03 metros;
- WaveCart - Carrinho de suporte para o equipamento e seus acessórios;
- Case - Mala de transporte
- **Wavevac Dual:** Aspirador de vapores;
- Aspirador de vapores, **Wavevac Dual**, completo com exclusivo sistema de acionamento automático;
- *Time Delay Off* mantém a aspiração durante mais seis segundos, garantindo a eliminação total e completa de todos vapores residuais da cavidade vaginal;
- Sistema de filtragem **H.E.P.A.** e carvão ativado;
- Mangueira tipo traqueia, com ponta de silicone autoclavável;
- Espéculos com duto aspirador de vapores;

ESPECIFICAÇÕES:

- Grau de proteção contra choque elétrico (Classe I);
- Grau de proteção contra líquidos (IPX1);
- Bivolt automático 115/230VAC – 50Hz a 60Hz;
- Proteção elétrica por fusível duplo;

CERTIFICADOS E NORMAS TÉCNICAS:

- NBR IEC 60601-1
- NBR IEC 60601-1-2
- NBR IEC 60601-1-6
- NBR IEC 60601-1-9
- IEC 60601-2-2

CERTIFICADOS

- CE- Certificado pela Comunidade Europeia
- ISO 13485
- BPF- Boas Práticas de Fabricação

Marca Loktal - Registro no Ministério da Saúde nº: 10362610023